



Epilepsialarm for innendørs og utendørs bruk

EpiMobile - bærbar epilepsialarm

EpiMobile er en epilepsialarm for personer som er aktive utenfor hjemmet. Alarmen kan brukes døgnet rundt både innendørs og utendørs.

EpiMobile registrerer og varsler ved anfall som følge av generaliserte tonisk/kloniske epileptiske anfall.

Hvis personen får et anfall, blir pårørende eller andre støttepersoner automatisk varslet via mobilenheten, både ved å ringe og sende SMS.



EpiMobile armbåndssensor

EpiMobile består av et armbånd med innebygd sensor og et oppladbart batteri.

Sensoren måler armens bevegelse i tre forskjellige retninger og registrerer om bevegelsene er av epileptisk art, eller om de er normale bevegelser.


EpiMobile passer for både voksne og barn fra 10 år eller med muskelstyrke tilsvarende en 10-åring.



EpiMobile mobilenhet

EpiMobile-kontrollenheten består av en mobil enhet med EpiMobile-applikasjonen installert. Brukeren bærer denne sammen med håndleddssensoren.

Håndleddssensoren og applikasjonen kommuniserer kontinuerlig med hverandre via Bluetooth. Alarmsignaler sendes fra sensoren til applikasjonen på mobiltelefonen, som sender en alarm til en eller flere støttepersoner ved et anfall, både som en samtale og som en SMS.

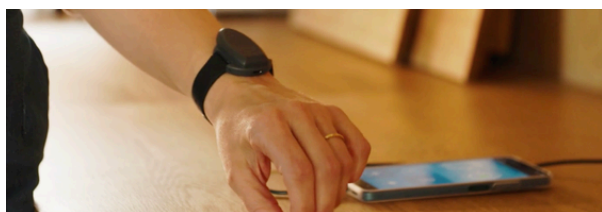


Alarmmottak

I EpiMobile-applikasjonen spesifiseres telefonnummeret til støttepersonen som skal motta alarmen. Hvis støttepersonen ikke bekrefter den mottatte alarmen, kan alarmen videresendes til et back-up nummer.

Det er mulig å varsle andre innen en gitt tidsperiode, og å varsle andre nærperso-ner når brukeren befinner seg i andre områder, såkalte lokasjoner.

Mobiltelefonens innebygde GPS kan brukes til å lokalisere personen hvis et anfall oppstår utenfor hjemmet.

Produktet suppleres med et SIM-kort. Dette er ikke inkludert. Et abonnement med 1 GB mobildata og god dekning i bruksområdet er nødvendig. Tvillingabonnement og kontantkort kan ikke brukes.

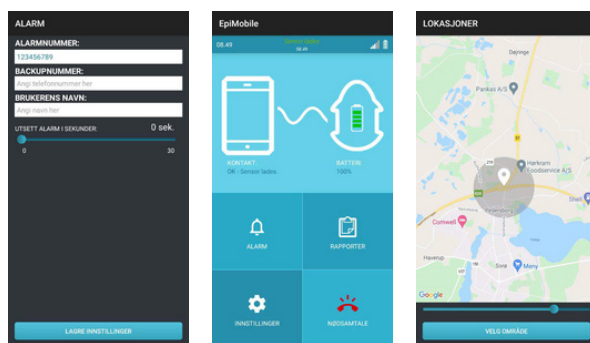

EpiMobile er et medisinsk utstyr, klasse I, og er CE-merket i samsvar med den europeiske forskriften 2017/745 - MDR.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER SENSOR

Innebygd batteri:	4,2 V litium polymer
IP-klassifisering:	IP 37
Lading:	USB-C

TEKNISKE SPESIFIKASJONER MOBILTELEFON

Operativsystem:	Android 15
Størrelse i mm:	171 x 77 x 8
Vekt:	194 g
IP-klassifisering:	IP 64

TILBEHØR

Beskyttelsesdeksel sender EpiMobile mg06 (inkludert i leveransen)

HMS.nr.	Art.nr.
336555	4642471