



For økt trygghet
Varslingshjelpemidler



ABILIA

Om Abilia

Vi i Abilia har lang erfaring med hjelpemidler til personer som har behov for ekstra trygghet og mest mulig selvstendighet. Det gjør oss engasjerte og gir oss en bred kompetanse innenfor hjelpemiddelområdet. Vi vet hvor viktig det er at hjelpemidlene er tilpasset brukerens behov, og våre konsulenter gir kontinuerlig rådgivning til brukere, pårørende og fagpersoner for at de skal finne riktig løsning for hver enkelt bruker. Vi vet hvor viktig tilgjengeligheten til våre produkter er for våre brukere, og vi legger stor vekt på leveringstid, service og support.

GIR BRUKEREN STØRRE SELVSTENDIGHET

Studier viser at Abilias hjelpemidler gir brukerne en følelse av at de er mindre avhengige av andre personer for å klare sine hverdagsrutiner. De føler seg tryggere på sin egen evne til å planlegge og håndtere livet sitt, og det gir større selvstendighet både hjemme, på skolen og i arbeidslivet.

Vi vil gi alle mennesker mulighet til å delta i samfunnet og vil gi dem gode forutsetninger for å ha et selvstendig liv.




Om våre varslingshjelpemidler

Våre varslingshjelpemidler er designet for at personer med behov for ekstra trygghet, skal kjenne seg trygge i og utenfor hjemmet. Det kan være en person med demens som trenger ekstra tilsyn, eller en person med epilepsi som trenger rask hjelp ved et anfall. Våre alarmer bidrar til en tryggere hverdag for både brukere og pårørende.

Mange av våre alarmer kombineres med viderekobling til en mobiltelefon eller personsøker. Dersom en person som har problemer med døgnorienteringen, er ute og vandrer om natten, kan en pårørende eller en annen støtteperson få en alarm når det skjer. Eller dersom et barn får et epileptisk anfall om natten, får foreldrene, som kanskje sover i et annet rom, en alarm.



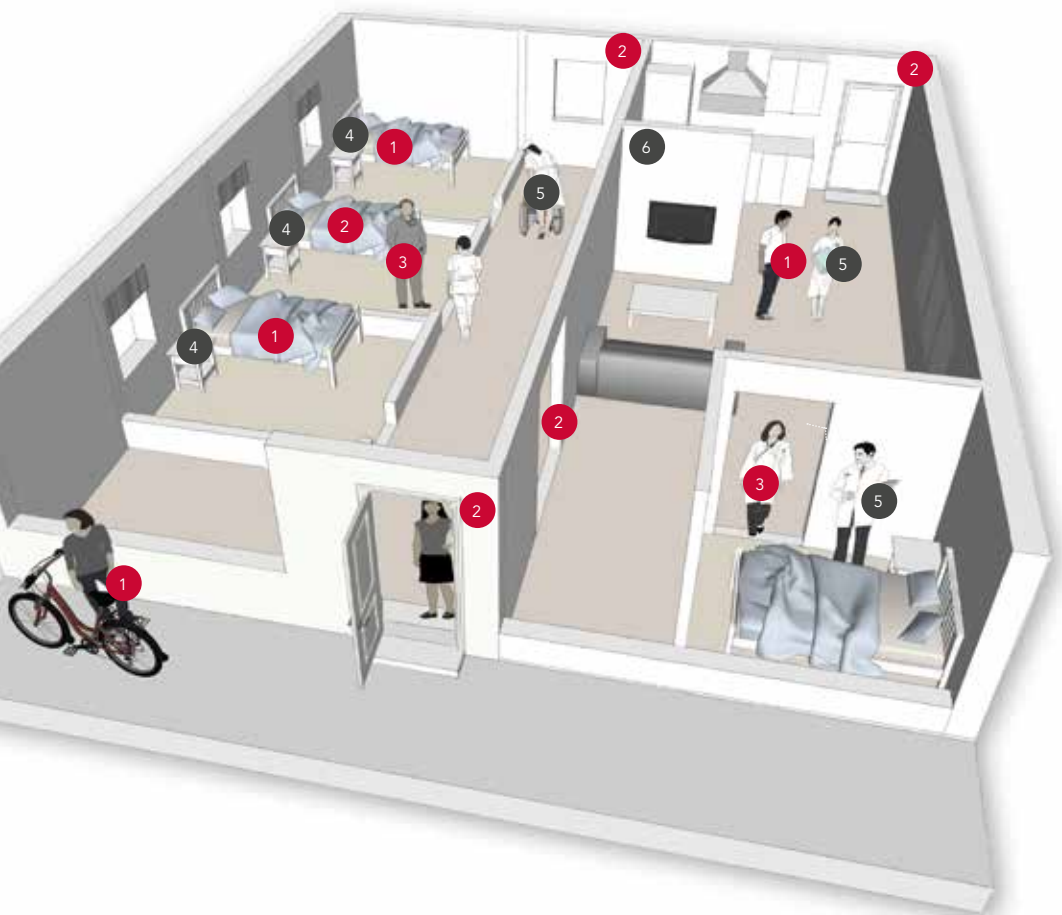

Sensorer

- 1 Epilepsi
- 2 Fravær og vandring
- 3 Kollegevarsling og påkalling

Viderevarsling

- 4 All in One sender
- 5 All in One personsøger
- 6 All in One repeater

Sensorer - Epilepsi



EMFIT EPILEPSIALARM

Emfit epilepsialarm registrerer og alarmerer ved tonisk/kloniske anfall med muskelkramper når personen ligger i sengen. Emfit epilepsialarm registrer både kramper og fravær.

Det er mulighet for å supplere med en ekstra sensor for å dekke et større område. Alarmen består av en sensor-matte som detekterer hjerterefrekvens og bevegelse og en kontrollenhet med skjulte innstillinger.



EPI MOBILE

EpiMobile registrerer og alarmerer ved kramper under generaliserte tonisk/kloniske epileptiske anfall og fungerer hele døgnet, både innendørs og utendørs. Alarmen sendes via GSM til to utvalgte støttepersoner via mobiltelefon, både som SMS og anrop.

Alarmen består av en armbåndssensor og en smarttelefon med applikasjonen EpiMobile.



EPI SAFE 2 GSM

EpiSafe er primært en innendørsalarm som registrerer og alarmerer ved kramper under generaliserte tonisk/kloniske epileptiske anfall og fungerer hele døgnet. Kontrollenheten har en integrert GSM-modul og sender alarmen til to utvalgte støttepersoner via mobiltelefon, både som SMS og anrop.

Alarmen består av en armbåndssensor og en kontrollenhet som mottar alarmen fra sensoren.



FALCK EPIFUKT

Falck EpiFukt er en epilepsialarm som registrerer fukt (urin, svette, oppkast, spytt) i forbindelse med et epileptisk anfall. Fuktsensoren plasseres i en seng eller på en stol. EpiFukts følsomhet kan stilles inn individuelt. Det er mulighet for å supplere med en ekstra sensor for å dekke et større område.

Alarmen består av et sensorlaken som registrerer fukt samt en kontrollenhet med innstillinger for følsomhet.



FALCK EPITON

Falck EpiTon er en epilepsialarm som registrerer lyd (skrik, smatting osv.) i forbindelse med et epileptisk anfall. Mikrofonsensoren plasseres så nær munnen som mulig, den kan f.eks. festes på klærne eller hodegjerdet på sengen. EpiTons følsomhet gjør den egnet også for anfall med svært svak lyd. Det er mulighet for å supplere med en ekstra sensor for å dekke et større område.

Alarmen består av en mikrofon som registrerer lyden samt en kontrollenhet med innstillinger for varighet, opphold, følsomhet.

Sensorer - Fravær og vandring



EMFIT SAFE BED

Emfit SafeBed er utviklet for å detektere fravær fra seng. Valgfri forsinkelsestid. Det er mulighet for å supplere med en ekstra sensor for å dekke et større område. Alarmen består av en sensormatte som detekterer hjertefrekvens og en kontrollenhet med skjulte innstillinger.



ALL IN ONE - BEVEGELSESENSOR

En bevegelse sensor kan registrere bevegelser innenfor et begrenset område. Noen detektorer kan plasseres f.eks. under sengen (registrerer når noen forlater sengen), i en døråpning eller i taket på en korridor (registrerer når noen passerer).



MAGNETKONTAKTER

En magnetkontakt er en sensor som utløses ved at kontakten mellom to komponenter brytes, f.eks. når en dør eller et vindu blir åpnet.



PASSASJEALARM

Alarmen består av en mottaker, en personbrikke og en dørføler. Den registrerer en alarm når personen som bærer personbrikken passerer dørsensoren. I samme system kan man ha flere personbrikker og dørsensorer.



LINJEDETEKTOR

Linjedetektoren utløser en alarm ved passering. Alarmen består av en detektor og en reflektor som plasseres et stykke fra hverandre. Når noen passerer mellom dem, brytes linjen og en alarm utløses.

Sensorer - Kollegavarsling og påkalling




ARMBÅNDSSENDER

All in One armbåndssender brukes for å tilkalle hjelp. Den kan brukes mellom kolleger som vil varsle hverandre om at de trenger bistand. Bruker selv kan også benytte seg av en påkallingsalarm for å tilkalle hjelp/bistand.

Viderevarsling - All in One

Flere av sensoren vi leverer krever en form for viderevarsling for at de skal bli en komplett løsning. (Gjelder ikke EpiMobile og EpiSafe). Dette for at signalene skal kunne sendes til aktuelle støttepersoner så de får beskjed om at alarmen har gått. All in One viderevarsler fra alle typer kabelbaserte sensorer og et utvalg av trådløse sendere, som for eksempel armbåndssendere. All in One kan viderevarsle til en personsøker, men også til mobiltelefon. Løsningen kan tilpasses individuelt for å sikre maksimal sikkerhet.

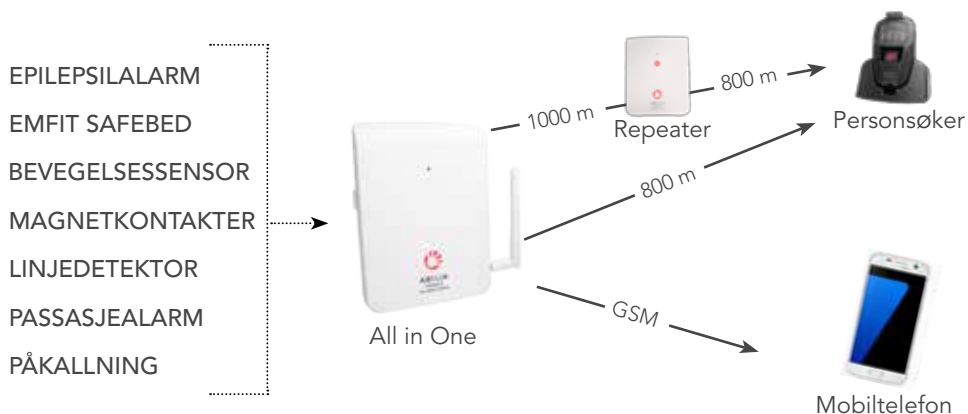

Abilia som leverandør

REGELVERKET FOR MEDISINSK UTSTYR

De fleste av våre produkter følger regelverket for medisinsk utstyr, som er basert på EU-direktiv 93/42/EEG. Det innebærer at vi tar ansvar gjennom hele livssyklusen til produktet, som omfatter blant annet konstruksjon, modifisering, tilvirkning, dokumentasjon, leveranse og oppfølging.

SERVICE OG SUPPORT

Uansett hvilket hjelpemiddel fra Abilia man velger, så inngår alltid 2 års garanti og fri service og support så lenge hjelpemiddelet brukes. Vi utfører også rekondisjonering av produktene. En rekondisjonering er en grundig rengjøring og produktgjennomgang som øker livslengde og gir en følelse av et fabrikknytt hjelpemiddel. Vår service- og supportavdeling er bemannet alle virkedager i kontortiden. Kontakt oss for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe.

KURS OG TEMADAGER

Hos Abilia holder vi regelmessige presentasjoner, workshops, temadager og kurs om hjelpemidlene våre. Vi kan kontaktes direkte ved behov for ytterligere informasjon om våre produkter og våre aktiviteter.



Du er velkommen til å kontakte oss

Abilia AS
www.abilia.no

Tfn: 23 28 94 00
info@abilia.no
support@abilia.no

2018.02.08

