

## All in One

Sørger for at alarmen kommer frem



Det er viktig at du føler deg trygg på at alarmen din når en mottaker på en sikker og effektiv måte.

All in One kan brukes til forskjellige løsninger i private boliger eller bofellesskap. Eksempler på bruksområder er epilepsialarm, vandrings- og fraværsalarm eller trygghetsalarm.

All in One gir beskjed til helsepersonell eller pårørende ved å videresende alarmen til en personsøker eller mobiltelefon.

Art.nr All in One: 330701

Art.nr All in One Basic: 330700



**ABILIA**

## ALL IN ONE

All in One brukes sammen med Abilias varslingshjelpemidler for å skape en komplett løsning. Det kan gjelde trådløse hjelpemidler, som for eksempel armbåndssendere, som skal varsle personalet i et bofellesskap. Et annet eksempel er kabelbaserte hjelpemidler, som Emfit Epilepsialarm, som skal varsle en forelder i løpet av natten. All in One kan registrere alarm fra både trådløse og kabelbaserte hjelpemidler og sørge for viderevarsling til en personsøker eller mobiltelefon.

## SIKKERHET OG FLEKSIBILITET

All in One har god rekkevidde ved fri sikt, noe som skaper økt bevegelsesfrihet for eksempel i større bygninger. Ved behov kan rekkevidden økes ytterligere gjennom en Repeater.

All in One har en såkalt heartbeatfunksjon som varsler dersom man havner utenfor rekkevidde, eller hvis det av andre årsaker ikke er kontakt mellom sender og mottaker. All in One fås både med

vibrator og lyd, eventuelt kan den brukes kun med vibrator. Det er mulig å supplere All in One med en ekstern vibrator som kan brukes av en forelder som vil være helt sikker på å våkne om natten hvis noe skulle skje.


Alle in One er enkel i bruk, har en tydelig og enkel design og monitorering og kan motta varsler fra fire trådløse sendere.

Løsningen består av to enheter: en sender og en mottaker i form av en personsøker, alternativt en mobiltelefon.

## ALL IN ONE BASIC

All in One fås også i en enklere versjon: All in One Basic som videregiver alarmer fra kabelbaserte hjelpemidler til personsøkere.

All in One Basic har samme gode rekkevidde og sikkerhet som hovedmodellen All in One.

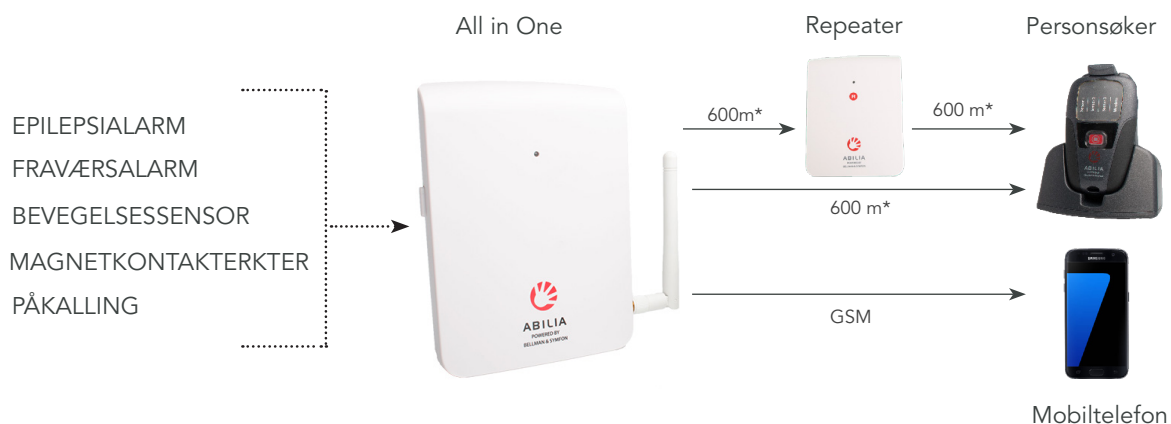

\* Rekkevidde fri sikt

### TEKNISK INFORMASJON

#### All in One sender

Mål mm (HxBxD): 140 x 105 x 30  
Radiofrekvens: 869,2375 MHz  
Rekkevidde (fri sikt): 600 m

#### All in One personsøker

Mål mm (HxBxD): 91 x 55 x 23  
Vekt: 60 g inkl. batterier  
Radiofrekvens: 869,2375 MHz

#### TILBEHØR

Bevegelsessensor 330706  
Universalsender 330708  
Armbåndssender 330709

#### ART. NR

