



## Dynamisk skärm med bild och ljudstöd GEWA One – fjärrkontroll med telefonfunktion

GEWA One är en fjärrkontroll som hjälper dig att hantera utrustning i ditt boende. Du kan styra TV, musikanläggning, mottagare för lampor, sängfunktioner, porttelefon och dörrautomatik.

För att du ska kunna hålla kontakt med dina nära och kära och snabbt kunna nå en stödperson har du möjlighet att ringa och sms:a med GEWA One.

Du väljer själv om du vill använda touchskärmen, eller navigera runt med en yttre manöverkontakt. Symboler, färger och röstinspelningar hjälper dig att snabbt hitta rätt knapp.

Art.nr 461600



**ABILIA**

## ETT KOMPLETT HJÄLPMEDEL


GEWA One är en fjärrkontroll med telefonfunktion, som ger dig möjlighet att kunna ringa och sms:a. Du anpassar själv hur sidor och knappar ska se ut och har möjlighet att lägga in snabbnummer till kontakter du lätt vill nå.

## STYR PÅ DITT SÄTT

Du behöver endast trycka lätt på skärmen för att aktivera en knapp. Välj en större knapp för att få en större tryckyta. Behöver du istället navigera runt i fjärrkontrollen med en yttre manöverkontakt har Abilia många olika att välja på.

## LÄTT ATT SE, HÖRA OCH FÖRSTÅ

Du kan ha symboler, olika färger och inspelat tal på knapparna för att lättare navigera rätt. Välj antal knappar som en sida ska visa.

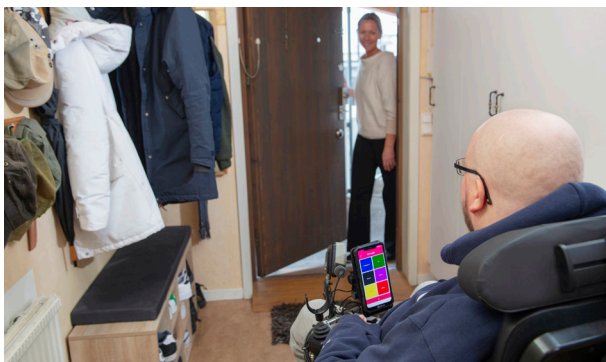

## SMART TEKNIK

GEWA One kan spela in signaler från t.ex. tv:ns vanliga fjärrkontroll. GEWA One kan också sända ut signaler mot t.ex. en GEWA sängmottagare för sängstyrning och kodade signaler till en lägenhetsdörr. Sätt i ett SIM-kort för att ringa och sms:a med nära och kära.

## STÖD OCH SÄKERHET

När din tekniker ska anpassa GEWA One till dig som användare, görs detta smidigt via myAbilia webbtjänst. Med denna tjänst har du som användare en säkerhetskopia på din fjärrkontrolls upplägg. Din tekniker kan i ett senare skede stödja dig på distans vid behov.

## LÄTT ATT HANTERA

Tillbehör som hållare speciellt utformad för GEWA One gör att du ser och kan hantera fjärrkontrollen från både rullstol och säng.

## LEVERERAS MED

- Mobil enhet, låst till GEWA One
- Laddare mobil enhet inkl USB-kabel
- GEWA Multibox
- Laddare GEWA Multibox inkl USB-kabel
- Hörlurar, 3,5 mm inkl USB-C adapter
- USB-kabel USB-C till USB-A
- Installationsverktyg för SIM-kort
- Användarmanual
- Voucher med licensnyckel

### TEKNISK INFORMATION GEWA ONE

#### MOBIL ENHET

Skärmstorlek	6.2"
Storlek	166 x 83 x 13,3 mm
Vikt	267 g
OS	Android 9

#### MULTIBOX

Storlek	108 x 67 x 22 mm
Vikt	153 g
Anslutningar:	3.5 mm, Mikro-USB
Kontrollsignaler:	IR, Radio

#### TILLBEHÖR

Telefonhållare
Miniarm
Universalarm

#### ART NR

461186
451030
621966

