




## Føl deg trygg Emfit SafeFloor

Med Emfit SafeFloor kan du føle deg tryggere hjemme. SafeFloor sender alarm til pleier eller pårørende dersom du skulle falle ut av eller forlate sengen.

SafeFloor er spesielt utviklet for deg som har demens og kan forhindre at du går deg vill eller at du blir liggende på gulvet hvis du faller ut av sengen.

Art.nr: 464020

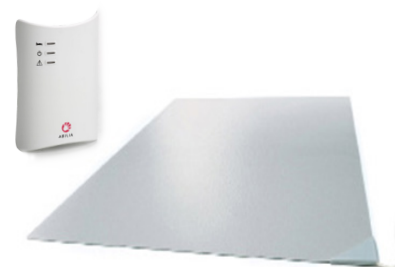

**ABILIA**

## SAFEFLOOR

SafeFloor består av en kontrollenhet som stilles inn og en sensor som plasseres på gulvet ved siden av sengen.

Emfit SafeFloor har et justerbart lydsignal som utløses ved berøring, for eksempel hvis du faller ut av sengen eller står opp midt på natten. Dette gir deg stor trygghet siden alarmen varsler personal eller pårørende som er i nærheten.

Alarmen kan kobles til en personsøker eller mobiltelefon ved hjelp av tilbehøret All in One og All in One Basic.

Den tekniske løsningen tilpasses i henhold til boligens fysiske miljø samt ønsker og rutiner for hvordan alarmen skal tas imot.

Emfit SafeFloor inngår i en serie pålitelige alarmprodukter som er godt utprøvd og brukes både i hjemmemiljø og omsorgsboliger verden over.



Emfit SafeFloor har et justerbart lydsignal som utløses ved berøring, for eksempel hvis du faller ut av sengen eller står opp midt på natten.

### TEKNISKE SPESIFIKASJON

| SENSOR                       | KONTROLLENHET                 | TILBEHØR         | ART NR | HMS NR |
|------------------------------|-------------------------------|------------------|--------|--------|
| Størrelse 927 x 580 x 2,4 mm | Størrelse 97 x 127 x 30 mm    | Strømadapter     | 464015 | 197646 |
| Vekt 1,6 kg                  | Vekt 150 g                    | 5 m kabel        | 464024 |        |
| Ferge Grå                    | Ferge Vit                     | Veggfeste        | 464005 |        |
| Kabel: 3 m                   | Batteri 2 st 1.5 V AA batteri | All in One       | 330701 | 212977 |
|                              |                               | All in One Basic | 330700 | 212976 |

