

A man in a wheelchair is shown in profile, sitting in a modern living room. He is holding a smartphone in his right hand, which is mounted on a stand. The room features a white door, a lamp, a television, and a potted plant. A red banner is overlaid on the image with white text.


Självständighet i ditt hem

Omgivningskontroll

Omgivningskontroll gör det möjligt för dig med kognitiva eller motoriska funktionsnedsättningar att enklare styra funktioner i din omgivning. Det kan till exempel vara att öppna eller stänga dörrar, styra lampor, sängfunktioner och att styra din TV.

Vårt system använder i huvudsak infrarött ljus (IR) för trådlös styrning. Det är ett säkert och användarvänligt system där du som användare får full kontroll. Det passar bra i ett hem där det är viktigt att du verkligen ser vad du styr för att vara säker på att du styr rätt funktion. Några av våra produkter har även utrustats med Gewa Radio (GR) för att möjliggöra styrning av funktioner utom synhåll. Vår senaste teknik möjliggör att styra tredjepartsappar och att navigera runt i din smartphone.

Våra produkter används i privata hem, på sjukhus, i skolor, på arbetsplatser och i speciellt anpassade boenden.

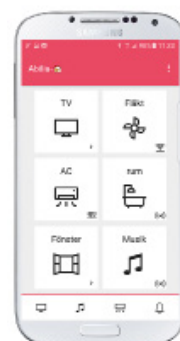

ABILIA

Detta kan du styra

Förutom konsumentprodukter såsom TV, digitalboxar, stereo, tredjepartsappar och smartphones, behöver du kunna styra andra funktioner i ditt hem. Med AbiliAs specialprodukter får du en helhetslösning och kan styra allt med en och samma fjärrkontroll. Att självständigt kunna styra din egen miljö ger dig frihet och säkerhet att kunna leva ditt liv på dina egna villkor.



ANDROMEDA MOTTAGARE
ART NR 419812 / 419850

1 DÖRRAR

Fjärrstyrd dörrautomatik ger dig möjlighet att självständigt ta dig in och ut ur din bostad och röra dig fritt inuti huset.



ANDROMEDA SOCKET
ART NR 419880

2 LAMPOR / APPARATER

Med en reläbox är det enkelt för dig att tända och släcka lampor och andra apparater. Reläboxen är lätt att koppla in, flytta och anpassa för nya funktioner.



ANDROMEDA SOCKET
ART NR 419880

3 HUSHÅLLSAPPARATER

Med Andromeda Socket och en valfri manöverkontakt kan du enkelt styra till exempel en hushållsapparat, batterileksak eller lampa. Andromeda Socket passar dig som har svårt att förstå till exempel hur en apparat fungerar, är darrig på handen, har nedsatt muskelkraft eller syn.



GEWA ANDROMEDA BED
ART NR 419893

4 SÄNG

Med sängmottagare kan du självständigt ändra läge i sängen. Tillsammans med en motordriven säng och trådlös fjärrkontroll kan du till exempel ändra huvudändens höjd. Sängmottagaren kan styra två funktioner samtidigt. Detta möjliggör en stabil och bekväm positionering.



Fjärrkontroller för varje behov

Abilia har ett brett utbud av fjärrkontroller och manöverkontakter för att tillgodose just ditt unika behov. Med en och samma enhet kan du styra både special- och konsumentprodukter. Abilias fjärrkontroller är programmerbara och kan lätt lära in IR-signaler från den kontroll som följer med din TV. Nedan följer ett urval av Abilias sortiment.

AVANCERAD FJÄRRKONTROLL FÖR BÅDE DEN FYSISKA OCH VIRTUELLA VÄRLDEN

Detta är vårt mest avancerade system som kan styra både den fysiska omgivningen i hemmet och även appar i en smartphone eller surfplatta. Det är enkelt att ändra mellan radskanning och punktskanningen beroende på vilka appar som används. Systemet kan användas med valfri manöverkontakt.



GEWA CONNECT
ART NR. 461600

FJÄRRKONTROLL MED TELEFONFUNKTION

GEWA One är en fjärrkontroll som hjälper dig att hantera utrustning i ditt boende. Du kan styra TV, musikanläggning, mottagare för lampor, sängfunktioner och dörrautomatik. För att du ska kunna hålla kontakt med dina nära och kära och snabbt kunna nå en stödperson har du möjlighet att ringa och sms:a med GEWA One.



GEWA ONE
ART NR. 461600

FJÄRRKONTROLL MED FINGERGUIDE OCH SKANNING

Fjärrkontrollen levereras med fingerguide. Det är lätt att byta över till skanning med en extern manöverkontakt. Bilder med symboler att fästa på knapparna kan enkelt skapas på Abilias hemsida.



CONTROL PROG
ART. NR. 425700

FJÄRRKONTROLL FÖR DIREKTPEKNING

Fjärrkontroll för direktpekning med fingerguide är bekväm att hålla i och är enkel att använda för dig med kognitiva eller motoriska funktionshinder. Bekräftelse av en knapptryckning sker i form av vibration, ljud och ljus. Bilder med symboler till knapparna kan enkelt skapas på Abilias hemsida.



GEWA MAXI
ART NR. 461130

FJÄRRKONTROLL MED EXTERNA MANÖVERKONTAKTER

Denna fjärrkontroll är bra för dig med stora kognitiva eller motoriska funktionsnedsättningar. Du kan styra upp till sex funktioner med separata valfria manöverkontakter.




BIG JACK
ART NR. 402500

STYRSÄTT OCH MANÖVERKONTAKTER

När du har behov av att styra en fjärrkontroll med en yttre manöverkontakt har Abilia ett stort sortiment att välja ur. En manöverkontakt kan till exempel vara en stor knapp eller ett sug- och blåsmunstycke.

I en individuell utprovning kan vi alltid hjälpa dig välja ut ett styrsätt, oavsett vilken rörelseförmåga eller muskelkraft du har.

Vi har olika monteringsystem som används för att placera din fjärrkontroll och eventuella kontakter där du behöver dem. Oavsett om du ligger i sängen och behöver tända en lampa, eller sitter i vardagsrummet och vill styra din TV så ska du ha möjlighet att nå allt du behöver.

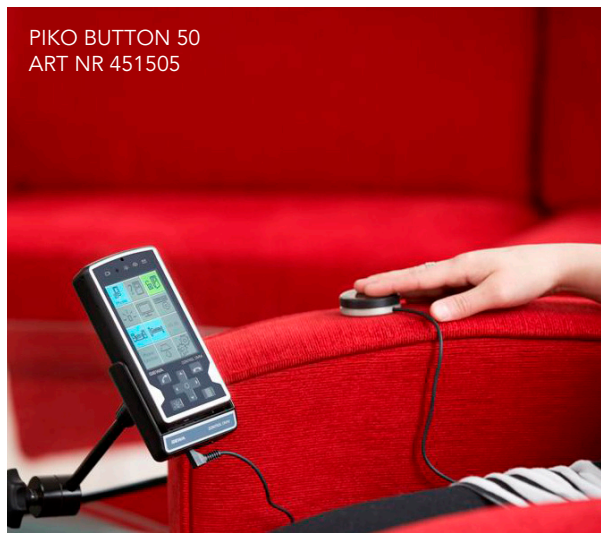

SÅ KAN DU FÅ OMGIVNINGSKONTROLL I DITT HEM

Abilias tekniska hjälpmedel tillhandahålls av hjälpmedelscentraler runt om i Sverige. Bostadsanpassning söker du i din kommun. För att få tillgång till ett hjälpmedel eller för att få en bostadsanpassning kontakter du din arbetsterapeut, vårdgivare eller vårdcentral, så kan de hjälpa dig vidare.



SPECIALANPASSNING OCH UTBILDNING

Många av våra hjälpmedel kan specialanpassas till varje enskild individ, därför är det viktigt att du och dina anhöriga känner er säkra på produkten och de möjligheter som finns. Våra konsulenter, produktansvariga och servicetekniker har god kunskap om produkterna och bistår vid förfrågan.



KURS, WORKSHOP OCH PRESENTATIONER

På Abilia håller vi regelbundet kurser/webinar, workshops och presentationer om våra hjälpmedel och lösningar. På vår hemsida hittar du en översikt över aktuella planerade kurser/webinar runt om i landet. Du kan också ta kontakt med oss direkt för att avtala om kurser/webinar eller produktvisningar utifrån ditt behov.

OM ABILIA

Abilia ger personer med särskilda behov möjlighet att öka sin självständighet och ta kontroll över sin vardag. Med över 40 års erfarenhet och stöd av forskningsresultat vet vi att våra hjälpmedel stödjer människor att skapa struktur i vardagen, kommunicera med sin omgivning, styra funktioner i sitt hem eller påkalla hjälp vid behov. Vi menar att alla människor ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället på sina villkor och vi brinner för att skapa förutsättningar för alla att leva ett rikare liv.

Vi på Abilia finns som hjälp och stöd i utvärderingsprocessen. Genom att identifiera just dina unika behov kan vi tillsammans hitta den ultimata lösningen av hjälpmedel för dig.