



For økt trygghet
Varslingshjelpemidler



ABILIA

Om Abilia

Vi i Abilia har lang erfaring med hjelpemidler til personer som har behov for ekstra trygghet og mest mulig selvstendighet. Det gjør oss engasjerte og gir oss en bred kompetanse innenfor hjelpemiddelområdet. Vi vet hvor viktig det er at hjelpemidlene er tilpasset brukerens behov, og våre konsulenter gir kontinuerlig rådgivning til brukere, pårørende og fagpersoner for at de skal finne riktig løsning for hver enkelt bruker. Vi vet hvor viktig tilgjengeligheten til våre produkter er for våre brukere, og vi legger stor vekt på leveringstid, service og support.

Gir brukeren større selvstendighet

Studier viser at Abilias hjelpemidler gir brukerne en følelse av at de er mindre avhengige av andre personer for å klare sine hverdagsrutiner. De føler seg tryggere på sin egen evne til å planlegge og håndtere livet sitt, og det gir større selvstendighet både hjemme, på skolen og i arbeidslivet.

Vi vil gi alle mennesker mulighet til å delta i samfunnet og vil gi dem gode forutsetninger for å ha et selvstendig liv.



Om våre varslingshjelpemidler

Våre varslingshjelpemidler er designet for at personer med behov for ekstra trygghet, skal kjenne seg trygge i og utenfor hjemmet. Det kan være en person med demens som trenger ekstra tilsyn, eller en person med epilepsi som trenger rask hjelp ved et anfall. Våre alarmer bidrar til en tryggere hverdag for både brukere og pårørende.

Mange av våre alarmer kombineres med viderekobling til en personsøker eller mobiltelefon. Dersom en person som har problemer med døgnorienteringen, er ute og vandrer om natten, kan en pårørende eller en annen støtteperson få en alarm når det skjer. Eller dersom et barn får et epileptisk anfall om natten, får foreldrene, som kanskje sover i et annet rom, en alarm.





Sensorer

- 1 Epilepsilarm
- 2 Tillsynslarm

Vidaresändning

- 4 IOR
- 5 TREX
- 6 REPO II

Sensorer - Epilepsi

Emfit epilepsialarm



Emfit epilepsialarm registrerer og alarmerer ved tonisk/ kloniske anfall med muskelkramper når personen ligger i sengen. Emfit epilepsialarm registrer både kramper og fravær.

Det er mulighet for å supplere med en ekstra sensor for å dekke et større område. Alarmen består av en sensormatte som dekker hjertefrekvens og bevegelse og en kontrollenhet med skjulte innstillinger.

EpiMobile



EpiMobile registrerer og alarmerer ved kramper under generaliserte tonisk/kloniske epileptiske anfall og fungerer hele døgnet, både innendørs og utendørs. Alarmen sendes via GSM til to utvalgte støttepersoner via mobiltelefon, både som SMS og anrop.

Alarmen består av en armbåndssensor og en smarttelefon med applikasjonen EpiMobile.

EpiSafe



EpiSafe er primært en innendørsalarm som registrerer og alarmerer ved kramper under generaliserte tonisk/kloniske epileptiske anfall og fungerer hele døgnet. Kontrollenheten har en integrert GSM-modul og sender alarmen til to utvalgte støttepersoner via mobiltelefon, både som SMS og anrop.

Alarmen består av en armbåndssensor og en kontroll- enhet som mottar alarmen fra sensoren.



Sensorer - Tilsynsalarm




Emfit Safebed

Emfit SafeBed er utviklet for å detektere fravær fra seng. Valgfri forsinkelsestid. Det er mulighet for å supplere med en ekstra sensor for å dekke et større område. Alarmen består av en sensormatte som detekterer hjerterefrekvens og en kontrollenhet med skjulte innstillinger.



Emfit safefloor

Med Emfit SafeFloor kan du føle deg tryggere hjemme. SafeFloor sender alarm til pleier eller pårørende dersom du skulle falle ut av eller forlate sengen. SafeFloor er spesielt utviklet for deg som har demens og kan forhindre at du går deg vill eller at du blir liggende på gulvet hvis du faller ut av sengen.

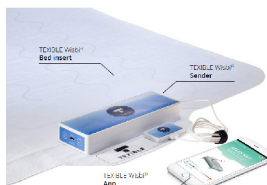

Wisbi Home

En fukt- og fraværslarm i ett og samme produkt. Alarmen består av en sensorenhet og en app som lastes ned til mobiltelefonen.



SMILE

Armbåndssender / halskjede som benyttes for å kunne ringe en pårørende eller omsorgsperson.



PIR II

En bevegelsesdetektor som kan varsle f.eks. når en person forlater sengen eller ved langvarig inaktivitet.

Viderevarsling

Samtlige av alarmene Abilia leverer er potensialfrie løsninger. Dvs at de kan knyttes opp imot en hvilken som helst type sender og mottaker.

PS!!! Gjelder ikke produktene EPIMobile og EPISafe, som i utgangspunktet er komplette løsninger. Ved behov kan en supplere med viderevarsling på EPISafe i de tilfellene der en ønsker å benytte en lokal mottaker.

IOR-senderenhet kobles til den aktuelle alarmen det er behov for og signalene overføres trådløst til TREX-mottaker. Om nødvendig kan REPO II benyttes for å forsterke rekkevidden mellom sender og mottaker.

Under en installasjon er løsningen tilpasset dagens behov. Rekkevidde er sikret, og om nødvendig brukes en eller flere rekkeviddeutvidere.



For viderevarsling via mobilnettverket til en mobiltelefon (via SMS), er den nåværende alarmsensoren koblet til senderenheten 4G Box.



Abilia som leverantör

MDR

Produktene markedsføres som tekniske hjelpemidler klasse I for personer med funksjonshemninger og oppfyller Forskrift (EU) 2017/745 - MDR.

Service och support

Uansett hvilket hjelpemiddel fra Abilia man velger, så inngår alltid 2 års garanti og fri service og support så lenge hjelpemidlet brukes. Vi utfører også rekondisjonering av produktene. En rekondisjonering er en grundig rengjøring og produktgjennomgang som øker livslengde og gir en følelse av et fabrikknytt hjelpemiddel. Vår service- og supportavdeling er bemannet alle virkedager i kontortiden. Kontakt oss for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe.

Kurser och temadager

Hos Abilia holder vi regelmessige presentasjoner, workshops, temadager og kurs om hjelpemidlene våre. Vi kan kontaktes direkte ved behov for ytterligere informasjon om våre produkter og våre aktiviteter.



**Tilgang til rette hjelpemidler til
rett tid kan være avgjørende**