



Epilepsivarsling i hjemmet


EpiSafe 2 GSM

EpiSafe er en mobil epilepsialarm for deg som trenger å få rask hjelp i hjemmet, både dag og natt.

EpiSafe registrerer og varsler ved kramper som en følge av generaliserte tonisk/kloniske epileptiske anall. Hvis du får et anfall varsles dine bistandspersoner automatisk via mobilen med oppringing og SMS.

Med EpiSafe kan du bevege deg fritt i ditt hjem og føle deg trygg.

ART NR: 464238 | HMS NR: 211353

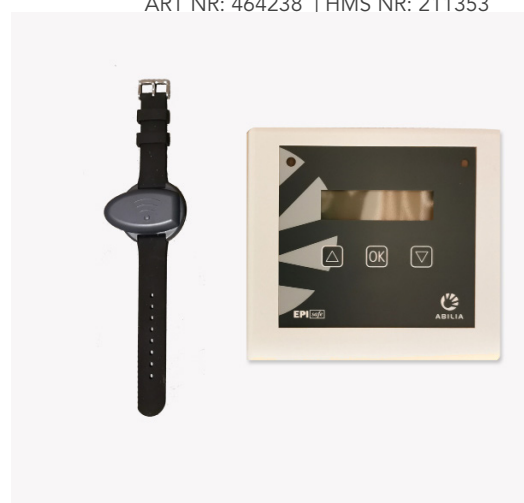

ABILIA

EPISAFE

EpiSafe består av et armbånd med innebygd sensor og et oppladbart batteri, og en hovedenhet som mottar alarm fra sensoren.

Sensoren måler armens bevegelse i tre dimensjoner og beregner om bevegelsen er av epileptisk karakter eller om det er vanlige bevegelser.

Sensoren og hovedenheten har en rekkevidde på mellom 20 til 50 meter i åpent rom. Innendørs rekkevidde er begrenset på grunn av ulike bygningsmaterialer. Rekkevidden kan også økes ved å bruke en repeater. Til hovedenheten kan ulike alarmer tilkobles, slik som personsøkere, alarmer til mobiltelefoner og trygghetsalarmer.

Vil du at alarmeren ska bli videresendt til en personsøker kan du koble det videre med hjelp av våre tilbehør, All in One og All in One Basic.

EpiSafe passer både for voksne og for barn fra ca 10 år eller 40kg.



EpiSafe 2 GSM med simkortshåldere

TEKNISK INFORMASJON

Lader	900mA, 5V DC
Innebygd batteri:	4,2V litium polymer
IPklassifisering	IP 32

TILBEHØR

Repeater	464233	233230
All in One	330701	212977
All in One Basic	330700	212976
All in One vibrator	330720	233224

ART NR HMS NR