



Kalenderklocka med talade påminnelser och kompletterande portabelt stöd

CARY Messenger

CARY Messenger är en kalenderklocka som hjälper användaren att hålla reda på tiden och få en överblick på dagens aktiviteter. Påminnelser om aktiviteter läses upp vid aktuell tidpunkt.

Produkten består av en stationär och en portabelt enhet. Den portabla enheten ger samma stöd som den stationära, men är utformad i ett mindre format som är lätt att bära med sig.

Art.nr: 508930



myABILIA



ABILIA

STÖD FÖR ATT HÅLLA REDA PÅ DYGNET OCH DAGENS HÄNDELSER

På båda enheterna kan användaren se datum, tid och dagens händelser. Genom att trycka på någon av skärmarna läses informationen upp. Båda enheterna ger visuella och auditiva påminnelser när aktiviteten ska ske.

HÖG GRAD AV INDIVIDANPASSNING

Aktiviteter kan symboliseras med bilder från det inbyggda bildarkivet eller med egna foton. Påminnelser kan kompletteras med automatiskt talat meddelande, antingen med en personlig inspelad röst eller med talsyntes som läser upp önskad text.

ADMINISTRATION GÖRS PÅ DEN STATIONÄRA ENHETEN ELLER VIA MYABILIA WEBBTJÄNST


Alla anpassningar och kalenderuppdateringar görs på den stationära enheten eller den webbaserade tjänsten myAbilia.

Den portabla enheten är låst till att enbart visa information och ge påminnelser.

Informationen synkroniseras trådlöst mellan den stationära enheten och den mobila genom internet och den webbaserade tjänsten myAbilia. Om användaren önskar använda den mobila enheten utanför Wi-Fi-nätverket, kan ett SIM-kort installeras.

SÄKER ANVÄNDNING

CARY Messengers båda enheter är låsta så att användaren inte kan ta sig utanför miljön som är avsedd som hjälpmedel. Den stationära enheten (CARY Base) är avsedd att användas inomhus i hemmiljö. Den portabla enheten (CARY Mobile) kan användas både inom- och utomhus.

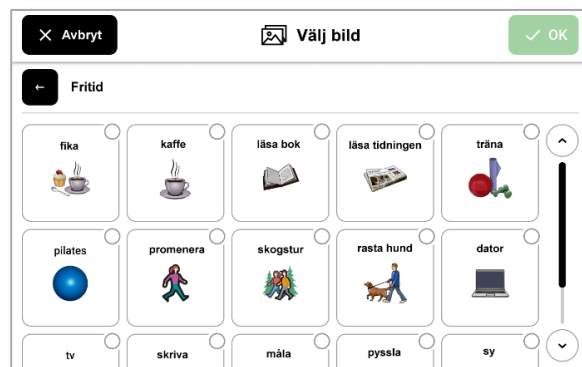

CARY Messenger är ett medicintekniskt hjälpmedel klass I för personer med funktionsnedsättningar och uppfyller Förordning (EU) 2017/745 - MDR.

CARY MESSENGER LEVERERAS MED :
Stationär och portabelt enhet, strömförsörjning, headset, fodral till den portabla enheten, samt bruksanvisning.

TEKNISK SPECIFIKATION

Stationär enhet:	Mobil enhet:
Mått 207x137x74 mm	Mått 80x166x13 mm
Vikt 520 g	Vikt 270 g
Skärm 8 tum	Skärm 6.4 tum