



Dynamisk skjerm med bilde- og lydstøtte

GEWA One – fjernkontroll med telefonfunksjon

GEWA One er en fjernkontroll som hjelper deg med å kontrollere utstyr i boligen din. Du kan styre TV, musikkanlegg, lamper, sengefunksjoner og dørautomatikk.

For at du skal kunne holde kontakt med familie og venner og raskt skal kunne nå en omsorgsperson, har du mulighet til å ringe og sende sms med GEWA One.

Du velger selv om du vil bruke touch-skjermen eller om du vil navigere rundt med en ekstern bryter. Symboler, farger og stemmeinnspillinger hjelper deg raskt med å finne riktig knapp.

Art.nr 4616302



ET KOMPLETT HJELPEMIDDEL


GEWA One er en fjernkontroll med telefonfunksjon, som gir deg mulighet til å kunne ringe og sende sms. Du tilpasser selv sider og knapper til hvordan du vil at de skal se ut, og du har mulighet til å legge inn hurtignummer til kontakter du ønsker å nå lett.

DU STYRER PÅ DIN MÅTE

Du behøver bare å trykke lett på skjermen for å aktivere en knapp. Velg en større knapp for å få større trykkområde. Hvis du i stedet trenger en ekstern bryter for å navigere rundt i fjernkontrollen, har Abilia mange forskjellige å velge blant.

LETT Å SE, HØRE OG FORSTÅ

Du kan ha symboler, forskjellige farger og innspilt tale på knappene så det blir enklere å navigere riktig. Velg hvor mange knapper en side skal vise.

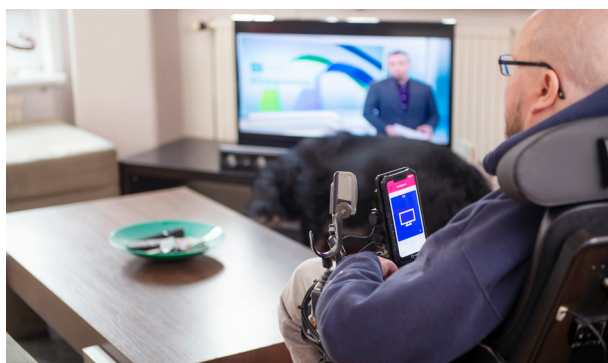

SMART TEKNIKK

GEWA One kan spille inn signaler fra f.eks. TV-ens vanlige IR fjernkontroll. GEWA One kan også sende ut signaler mot f.eks. en GEWA sengemottaker for sengestyring eller kodete signaler til en inngangsdør. Sett i et SIM-kort hvis du vil kunne ringe og sende sms til familie og venner.

STØTTE OG SIKKERHET

Når teknikeren skal tilpasse GEWA One til deg som bruker, gjøres dette enkelt via myAbilia nettjeneste. Med denne tjenesten har du som bruker en sikkerhetskopi på fjernkontrollens opplegg. Teknikeren kan senere hjelpe deg på avstand ved behov.

LETT Å HÅNTERE

Tilbehør som holdere spesielt utformet for GEWA One, gjør at du kan se og håndtere fjernkontrollen fra både rullestol og seng.

LEVERES MED

- Mobil enhet, låst til GEWA One
- GEWA Multibox
- GEWA smart kabel (mobil enhet-multibox)
- Lader GEWA One
- USB-kabel USB-C til USB-A
- Brukermanual
- Kvittering med lisensnøkkel

TEKNISK INFORMASJON GEWA ONE

MOBIL ENHET		MULTIBOX		TILBEHØR	ART NR
Skjermstørrelse	6,6"	Størrelser	108 x 67 x 22 mm	Telefonholder	461198
Størrelser	174.45 x 81.8 x 13.6 mm	Vekt	153 g	Miniarm	451030
Vekt	310 g	Tilkoblinger:	3.5 mm, Mikro-USB	Universalarm	621966
OS	Android 12	Kontrollsignaler:	IR, Radio		

GEWA One er medisinsk utstyr utviklet til bruk innendørs.