



Översikt och trygghet i vardagen


MEMOplanner

Att skapa struktur i vardagen kan ibland vara en utmaning. Att försöka hålla ordning kräver mycket energi, vilket ofta leder till stress och oro.

MEMOplanner ger individen överblick över vilken dag det är, tid på dygnet och bokade aktiviteter för dagen, veckan och månaden. Användaren får tydliga påminnelser och stöd för checklistor och anteckningar.

Studier visar att MEMOplanner minskar stressen för individen och deras anhöriga, och kan minska konflikter kring vardagssysslor. Ytterligare forskning visar att tidsstöd som MEMOplanner förbättrar både känsla för tid och självförtroende i vardagen.

Art.nr: 462930 MEMOplanner Medium 5
Art.nr: 462885 MEMOplanner Large 3

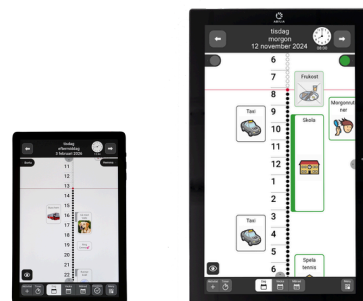


ABILIA

Få översikt i vardagen

Välj mellan listvy eller en tidpelare där hela eller delar av dagen visas som upplysta prickar som släcks allteftersom tiden går. Det ger en enkel överblick över hur mycket av dagen som har gått.

Kalendern är indelad i två separata områden, exempelvis för skola eller arbete på ena sidan och fritidsaktiviteter på andra. Den visar även om det är morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll eller natt, och skärmen blir mer diskret på natten. Alla funktioner kan också läsas upp med talsyntes för extra stöd.

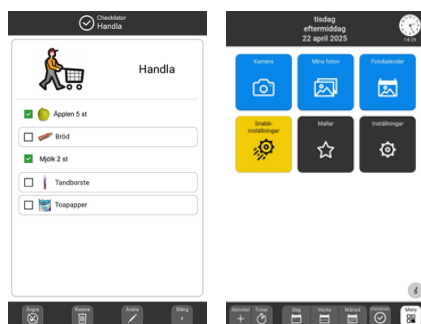

Bli påmind och komma igång

Aktiviteter visas tydligt med bild och text, ofta kopplade till checklista eller anteckning.

Påminnelser kan vara ett personligt inspelat meddelande.

För återkommande aktiviteter kan användaren skapa mallar med bild, tidsåtgång och uppgifter, vilket gör det snabbt och enkelt att lägga in dem i schemat.



Placera där den syns

MEMOplanner Large hänges på väggen. MEMOplanner Medium är för individer som behöver kunna bära med sig sitt hjälpmedel.

Tidsstöd i mobilen

Utan extra kostnad kan användaren installera MEMOplanner Go på sin egen smartphone. På så sätt får användaren sitt stöd med sig även när hen lämnar hemmet. Appen MEMOplanner Go laddas då ner från App Store eller Google Play.

Hjälp på distans

Abilias webbtjänst myAbilia gör det enkelt för anhöriga och stödpersoner att, på distans, hjälpa till att lägga upp aktiviteter eller se om aktiviteter har utförts och kvitterats.

MEMOplanner Medium levereras med:

Strömadapter, bordsstativ, skyddsfodral, väggfäste, mjuk väska och bruksanvisning.

MEMOplanner Large levereras med:

Strömadapter, väggfäste, och bruksanvisning.

TEKNISK SPECIFIKATION

Artikel	Medium	Large
Skärmstorlek	10 tum	24 tum
Mått (HxBxD)	24x16x1 cm	60x36x4 cm
Vikt	0,5 kg	4,6 kg
Inbyggd kamera	Fram och bak	Fram

TILLBEHÖR

500760	Bordsstativ MEMOplanner Large
462931	Skyddsfodral MEMOplanner Medium 5

MEMOplanner är en medicinteknisk produkt, klass I, och är CE-märkt i enlighet med den europeiska förordningen 2017 / 745 - MDR.