


MEMOmessenger

gir automatisk påminnelser med personlig innleste meldinger

MEMOmessenger

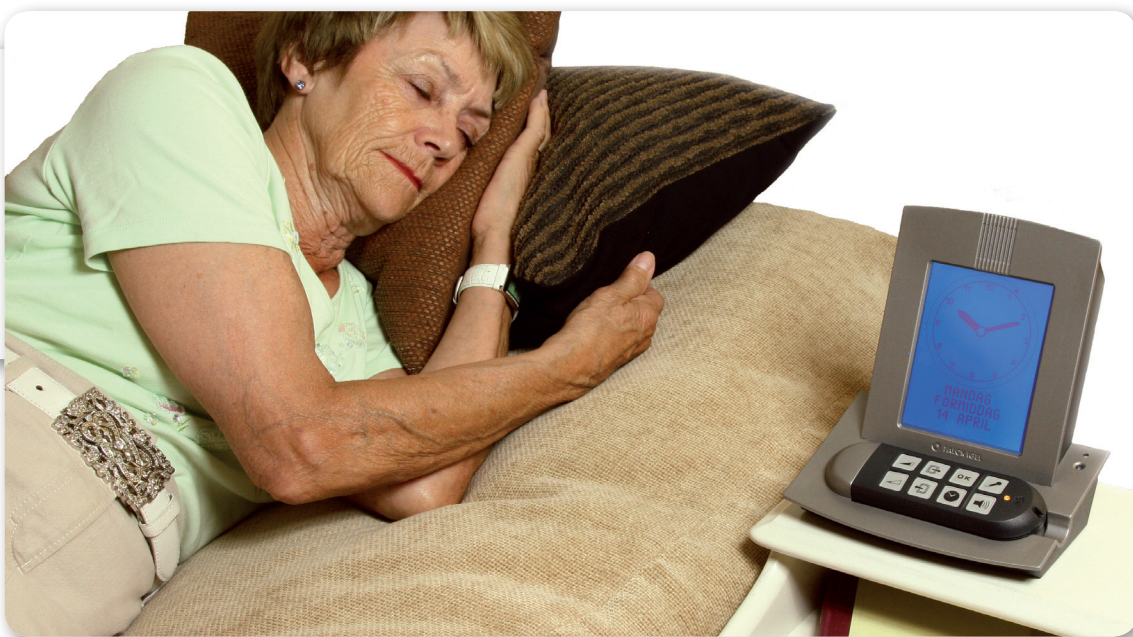

Klokken hjelper meg å komme opp om morgenen. Med ekstra høyttalere og vibrasjon kan jeg ikke unngå å høre den ”



TALENDE KLOKKE MED PÅMINNELSER

Memomessenger er en talende klokke som gir automatiske påminnelser i form av personlig innleste meldinger til rett tid. Den sier og viser hvor mye klokken er, hvilket år, måned, dato samt når på døgnet det er. Memomessenger består av en stasjonær enhet, Memobase og en bærbar enhet, Memogo. Memobase har en stor og tydelig touchskjerm for innstillinger direkte på skjermen.

Meldinger kan gis på valgfrie datoer, de kan repeteres og gis innenfor en tidsbegrenset periode (f.eks ferie). Nesten ubegrenset antall påminnelser kan spilles inn, maks innspillingstid er 26 min. Velg enkeltmeldinger, daglige, ukentlige, annenhver uke, månedlige og årlige meldinger.

Memogo kan tas med i lommen og gi påminnelser uansett hvor du er. For diskret påminnelse kan Memogo brukes med ørepropper og meldingene forsterkes med vibrasjon. Memomessenger varsler automatisk når den må lades.

HUSKELAPPER

Memogo har en innspillingsfunksjon for inntil 10 huskelapper. Dette gir mulighet til å lese inn informasjon, som man kan høre på når det passer.

MEMOmessenger

> ARTIKKELNUMMER: MEMOmessenger 502570

> ARTIKKELNUMMER: OPPGRADERING TIL VERSJON 2 502573

> SE VÅR HJEMMESIDE for mer informasjon

INSTALLINGSMULIGHETER

Valgbare innstillingsmuligheter gjør Memomessenger fleksibel og brukervennlig. Velg digital eller analog tidvisning. Velg kvinne eller mannsstemme for opplesing av tid. Velg å repetere innlest talemelding 10 ganger, enten hvert minutt eller hvert tredje minutt.

Velg visuell nedtelling av tiden til kommende aktivitet (kvarterursprinsippet: en prikk tilsvarer et kvarter).

TILBEHØR

Eksterne høyttalere kan kobles til klokken for å høre meldingene i flere rom. Bryter kan plugges til Memobase for å styre visse funksjoner, f.eks for å sjekke dag og tid. Ekstern vibrator kan plugges til Memobase for å forsterke signalene, f.eks ved vekking.

LEVERES MED

Halsenor, veske, etiketter og ørepropper til Memogo. Pusseklut og pekepenn til display, brukerveiledning, strømforsyning og laminert ukeplan og dagsplan for kopiering.

TEKNISK INFORMASJON

Memobase: Vekt: 710 g, Mål: 200x185x150 mm, Skjermstørrelse: 7", Innebygd mikrofon og høyttalere. Taletid: 26 min og 20 sek.

Memogo: Vekt 115 g, Mål: 123x50x26 mm, Batteri: 3,6V

Strømforsyning: 12V 0,8A. Ladetid ved utladet batteri: 3,5-4 timer