


FLEXIBOARD

ett förenklat tangentbord

Flexiboard är ett tangentbord för personer som har svårt att använda ett vanligt tangentbord, på grund av fysiska eller kognitiva nedsättningar eller en kombination.

SJÄLVSTÄNDIG VARDAG

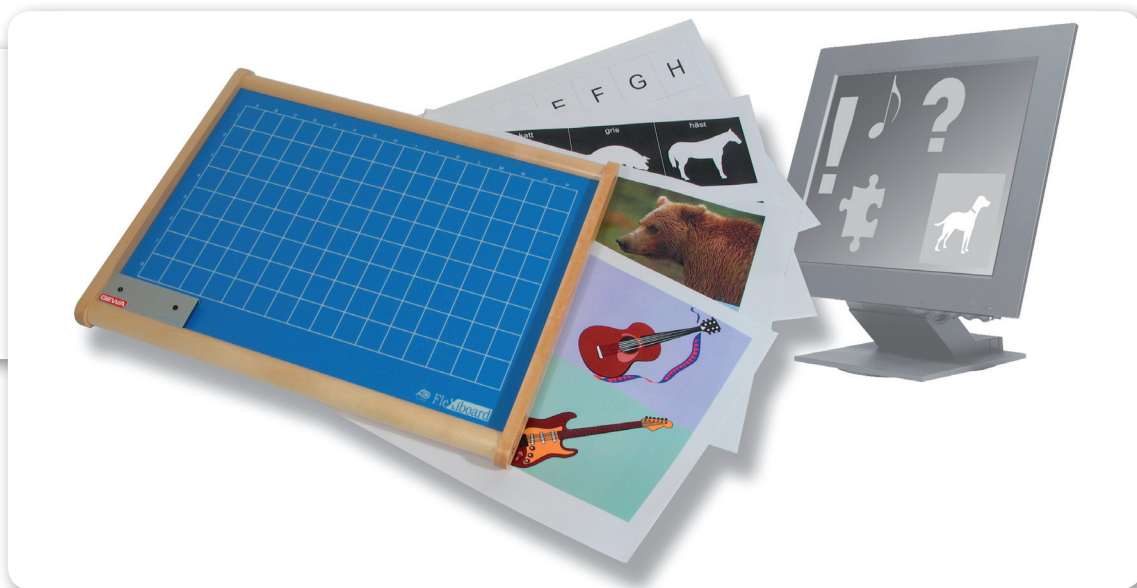

*Jag kan självständigt
använda datorn.*

”

**ABILIA**

GEWA AB | FALCK IGEL

FLEXIBOARD

Flexiboard är ett tangentbord som man själv bestämmer tangenterna på. "Tangenten" är egentligen en bild på ett pappersöverlägg. När man trycker på en bild på Flexiboard händer det som man bestämt ska hända i datorn, t ex att en symbol visas på skärmen.

Man kan enkelt byta mellan olika överlägg. Eftersom Flexiboard automatiskt känner av vilket överlägg som ligger på kan användaren självständigt byta överlägg. Överläggen kan innehålla olika bilder, symboler och text.

Flexiboard ersätter i första hand datorns tangentbord men kan även styra muspekaren. Detta innebär att även personer som inte kan stava och läsa nu får utökade möjligheter att använda datorn efter sina personliga förutsättningar.

Anslagsfördröjning och repetition på Flexiboard kan ställas in för olika användare. Tangentbordet har A3-storlek och kan delas upp i 128 rutor eller färre.

I Flexiboard ingår programmen Flexiladdaren och FlexiKom.

FLEXILADDAREN

Flexiladdaren gör att man på ett mycket enkelt sätt kan skapa och skriva ut egna överlägg och programpaketet

FLEXIBOARD

> **ARTIKELNUMMER:** 655021 Flexiboard

> **MER INFORMATION:** besök vår hemsida för fler bilder, filmer och mer information.

PROGRAMPAKETET FLEXIKOM

FlexiWord är ett anpassat ordbehandlingsprogram där man kan skriva med bilder, symboler och bokstäver. Det går också bra att använda syntetiskt och inspelat tal. FlexiWord kan därför även användas för kommunikation. I FlexiWord är det enkelt att spara, hämta och skriva ut dokument. FlexiWord kan ställas in på många sätt för att passa användarens behov, t ex bildstorlek, bakgrundsfärg och synliga knappar på skärmen.

FlexiView är ett bildvisningsprogram som visar en bild åt gången. Till varje bild kan man koppla syntetiskt tal eller inspelat ljud. Det är också möjligt att visa bokstäver, ord och meningar samt att spela upp videosekvenser och musik. FlexiView kan användas för "tryck-hända"-övningar och för att visa bildspel. Det kan också användas för kommunikation. FlexiView kan ställas in på många olika sätt för att passa användarens behov, t ex bildstorlek, bakgrundsfärg och synliga knappar på skärmen.

Talsyntes med rösterna Ann Marie, Ingmar, Emma och Erik.

Flexiboard ansluts till USB-porten på PC. Passar Windows 2000, XP, Vista och Windows 7.