

## VocaFlexibel | VocaFlex Universal

Ger en röst till den som inte kan tala

Ger kognitivt stöd



VOCAFLEX | VOCAFLEXIBEL

Är en liten bärbar samtalsapparat med stor talkapacitet.

VocaFlex ger dig möjlighet att delta i samtal, tala i telefon, delta i aktiviteter, ge besked och framföra önskemål.

VocaFlex kan användas som kognitivt stöd med exempelvis inspelade instruktioner och strukturer i aktiviteter/arbetsuppgifter.



**ABILIA**

GEWA AB | FALCK IGEL

<b>Falck 3930 VocaFlexibel, 30 min minneskapacitet</b>	<b>104100</b>
<b>Falck 3960 VocaFlexibel, 60 min minneskapacitet</b>	<b>104101</b>
<b>Falck 3928 VocaFlex Universal, 120 min minneskapacitet</b>	<b>104128</b>

**VocaFlex** är en liten, bärbar och tålig samtalsapparat med mycket god ljudkvalitet. VocaFlex har lösa överlägg/SmartGuider som används vid inspelning/uppspelning av ord/meningar. Det inspelade talet sparas i VocaFlexen och spelas upp med hjälp av överlägget/SmartGuiden. Varje överlägg har en unik streckkod som gör att VocaFlex känner igen överlägget, vilket gör det lätt att byta ordförråd. Till VocaFlex kan upp till 51 olika överlägg med 4, 8 och 16 fälts indelning användas. Varje fält innehåller 10 eller 20 sekunders inspelningstid.

#### ENKEL ATT ANPASSA – ENKEL ATT ANVÄNDA

- Automatisk på/av funktion
- Volymreglering i tre lägen
- Enkel inspelning av ord/meningar
- Direkt val och/eller sekvenstryck (VocaFlex universal)
- Inställning av trycktid och paustid
- Kraftfulla batterier med extern laddare
- Håller kvar minnet vid urladdade batterier

Till VocaFlex medföljer ett idéhäfte med tips och idéer till användningen

#### TILLBEHÖR TILL VOCAFLEXIBEL OCH VOCAFLEX UNIVERSAL


Axel- och midjeväska i läder	463280
Falck 3322 TelefonTillkoppling	200822
Falck SmartGuide VocaFlex, 4 fält, 1 styck	104140
Falck SmartGuide VocaFlex, 8 fält, 1 styck	104141
Falck SmartGuide VocaFlex, 16 fält 1 styck	104142

#### TEKNISK INFORMATION

- Vikt: 290 g
- Mått: 16x10x3 cm
- Tryckkraft: 50 – 100 g beroende av fältstorlek
- Batteri: Lithium Ion (Lilon), 600 mAh



Axel- och midjeväska i läder

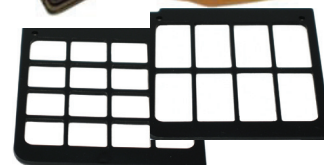

SmartGuide 4, 8 och 16 fält



TelefonTillkoppling

